

N° de série : 22081307	N° Document : 32V12 / DD1000
Référence : Socorex Acura 825- 1000 / Ref Dutscher: 061111	Mise en service : Date : 10/12/2012
Modèle : Socorex - var. 100-1000 µl - type A	Nombre de canaux : 1
Constructeur : SOCOREX	Heure : 15:17:33

Demandé par : DOMINIQUE DUTSCHER

BRUMATH

Volume : 100 µl

Moyenne : 102,63 µl	Minimum : 102,35 µl	Maximum : 102,85 µl		
Erreur systématique Ev : 2,63 µl	E% 2,63 %	Tolérance E : 8 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,16 µl	CV% 0,15 %	Tolérance S : 3 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)				
102,02	102,13	102,23	102,38	102,26 102,46 102,44 102,52 102,37 102,23

Volume : 500 µl

Moyenne : 502,17 µl	Minimum : 501,90 µl	Maximum : 502,58 µl		
Erreur systématique Ev : 2,17 µl	E% 0,43 %	Tolérance E : 8 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,23 µl	CV% 0,05 %	Tolérance S : 3 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)				
500,98	500,91	500,30	500,38	500,48 500,53 500,53 500,41 500,39 500,73

Volume : 1000 µl

Moyenne : 997,83 µl	Minimum : 997,02 µl	Maximum : 999,75 µl		
Erreur systématique Ev : -2,17 µl	E% -0,22 %	Tolérance E : 8 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,86 µl	CV% 0,09 %	Tolérance S : 3 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)				
996,56	995,58	994,91	994,61	994,42 994,65 994,10 993,85 993,99 993,84

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.


Conclusion

**CONFORME**

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature :

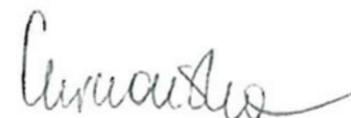

Identification balance : Sartorius LE225D n°19002435

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g)  
méthode gravimétrique : procédure PLM050

Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011  
référentiel : ISO 8655

Température : 22,2 °C

Pression : 995,6 hPa

Hygrométrie : 62,9 %

Pointe : ClearLine 014200CL

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0032 µl/mg

ClearLine 035260CL (Low Binding)

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285

SAS au capital de 65 000 € - RCS : Strasbourg TI 444856942 - SIRET 444 856 942 00016 - APE 743 B

Site Internet : www.aps-metrologie.fr / E-mail : contact@aps-metrologie.fr